

stryker

Performance-PRO™ XT

camilla manual para ambulancia



Performance-PRO™ XT

camilla manual para ambulancia

Como médico, lo desconocido está en todas partes. En cada llamada pueden surgir situaciones inciertas. Tenemos el poder de ayudar a prepararnos para la incertidumbre. Presentamos nuestra camilla de ambulancia Stryker Performance-PRO XT. Su construcción de aluminio y su capacidad de peso de 318 kg proporcionan una camilla de ambulancia manual ligera y versátil con una estabilidad mejorada.

La altura de carga ajustable en tres posiciones de la Performance-PRO XT se adapta a múltiples alturas de ambulancia y fomenta una mecánica corporal adecuada al cargar y descargar. Las barandillas XPS opcionales aumentan la superficie de la cuna en un 38% como máximo, ofreciendo una solución para pacientes de diversos tamaños. La sección retráctil de cabeza permite una movilidad de 360° en cualquier posición de altura para una máxima versatilidad. Los controles duplicados de elevación y agarre de los extremos de cabeza y pies proporcionan posiciones de elevación ergonómicas que se adaptan a cuidadores de diferentes tamaños.

Versatilidad. Es algo poderoso

La Performance-PRO XT es nuestra resistente camilla manual de aluminio. Versatilidad, rendimiento probado y mayor estabilidad definen nuestra Performance-PRO XT.




Principales características

- La barra de seguridad con capacidad de elevación garantiza la confianza en el manejo. Reduce la altura de elevación para operadores más pequeños.
- El espacio para las manos alrededor de la camilla permite la seguridad del operador.
- Altura de carga ajustable exclusiva en el sector, la altura de carga regulable en tres posiciones se ajusta a diferentes alturas de ambulancia.
- El asa de liberación integrada ofrece el máximo control al operador durante el transporte y se guarda cuando no se utiliza.



Asa de liberación lateral

La manilla de liberación lateral permite subir y bajar una camilla desocupada por una sola persona.

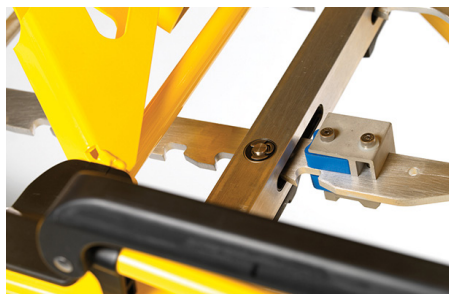

Altura de carga ajustable

La altura de carga regulable en tres posiciones se ajusta a diferentes alturas de ambulancia.



Sección de elevación y sujeción de cabeza y pies

Ayuda a la elevación ergonómica.

XPS

Ajustable con siete posiciones de bloqueo e incluye un colchón más ancho que reduce el espacio de transferencia y diseñado pensando en la comodidad del paciente.

Respaldo con asistencia neumática

Una innovación de Stryker. Reduce significativamente el esfuerzo del operador y aumenta la comodidad del paciente.

Posición de choque, pierna plana o rodilla opcional

El cierre de rodilla proporciona comodidad al paciente y mayor espacio de elevación.

Sistema de sujeción en X

Cumple las normas de seguridad de las pruebas de choque dinámico SAE J3027.

Sección de cabeza retráctil

La sección de cabeza retráctil proporciona una movilidad de 360 grados en cualquier posición de altura.

Controles de pie

Controles duplicados en las barras de elevación superior e inferior para adaptarse a operarios de todos los tamaños.

Estructura de aluminio en X patentado, fiabilidad probada en las condiciones más exigentes.

hasta **38%**
mayor superficie
con XPS

318kg
capacidad de
peso

360°
grados de movilidad
en cualquier altura

*Capacidad de peso de 318 kg con una capacidad de elevación sin asistencia de 227 kg (Las cargas de camilla de más de 136 kg pueden requerir asistencia adicional para alcanzar la altura de carga de camilla establecida).

Especificaciones

Modelo	6086
Altura¹	
Posición 1	13.8 in (35.1 cm)
Posición 2	22 in (55.9 cm)
Posición 3	25.8 in (66.5 cm)
Posición 4	28.1 in (71.4 cm)
Posición 5	31.9 in (81 cm)
Posición 6	34.6 in (87.9 cm)
Posición 7	37.3 in (94.7 cm)
Posición 8	40 in (101.6 cm)
Posición 9	42.2 in (107.2 cm)
Ajuste de la altura de carga	
Alta	Altura de carga de 34 in (86 cm) y superior
Média	Altura de carga entre 30 – 34 in (76 – 86 cm)
Baja	Altura de carga inferior a 30 in (76 cm)
Longitud	
Estándar	80 in (203 cm)
Mínima	64 in (163 cm)
Ancho	23 in (58 cm)
Peso²	89 lb (40.37 kg)
Ruedas	
Diámetro	6 in (15 cm)
Ancho	2 in (5 cm)
Articulación	
Respaldo 0 –73°	
Posición de choque +15°	
Quiebre de rodilla opcional 30°	
Capacidad de peso máximo	700 lb (318 kg)
Operador mínimo requerido	
Camilla ocupada	2
Camilla desocupada	1
Sistema de sujeción recomendado	
Power-LOAD	Modelo 6390
Anclaje de piso	Modelo 6370 o 6377
Anclaje a pared	Modelo 6371
Altura de carga recomendada³	hasta 34 in (86.4 cm)

Soporte Técnico

El Soporte Técnico de Stryker está formado por un equipo de profesionales disponibles para ayudarle con sus necesidades de Performance-LOAD. Póngase en contacto por teléfono en el 1 800 STRYKER o por correo electrónico en TechnicalSupport@Stryker.com.

Servicio ProCare de Stryker

Con soluciones de mantenimiento, servicio y flujo de trabajo que mantienen sus equipos de forma proactiva, le ayudamos a aprovechar hasta el último céntimo de su inversión. El tiempo de respuesta prioritaria de dos horas y el plazo de entrega del producto de 24 a 72 horas le ayudan a centrarse más en sus pacientes y menos en el mantenimiento del equipo.

Programa financiero Flex

Nuestros programas financieros proporcionan una gama de alternativas inteligentes diseñadas para adaptarse a las necesidades de su organización. Ofrecemos flexibilidad más allá de una compra al contado con estructuras de pago personalizables para satisfacer las necesidades presupuestarias y ayudar a crear estabilidad financiera a largo plazo. También disponemos de soluciones de financiación especializadas para ayuntamientos y otros organismos públicos.

Para obtener más información sobre la amplia gama de servicios financieros, llame al 1 888 308 3146.

¹Altura medida desde la parte inferior del colchón de la sección de asiento hasta el nivel del suelo.
²La cuna es pesada sin el colchón ni las sujeciones.
³La altura de carga puede ajustarse entre 27,25 pol. y 34 pol.

Stryker se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Vídeo de servicio incluido con todos los pedidos.
La camilla Performance-PRO XT ha sido diseñada para cumplir con la Especificación Federal para Ambulancias Star-of-Life KKK-A-1822. La Performance-PRO XT está diseñado para ser compatible con los sistemas de fijación de cunas de la competencia.
La combinación de colores amarillo y negro es una marca registrada de Stryker Corporation.

Cumple las normas de colisión dinámica con el sistema de fijación de cuna Performance-LOAD (SAE J3027 con X-restraints).
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o han solicitado el registro de las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Performance Pro, Power-LOAD, Stryker, . Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios o titulares.